



HI-FI MOCKUPS · V1.0

# Saúde do rebanho no bolso.

Processo criativo, 12 telas mobile high-fidelity para monitoramento contínuo de bovinos via coleira inteligente. Dark-first, projetado para uso em campo.

PLATAFORMA


iOS/Android

IDIOMA

PT-BR

PERSONA

Pecuarista · Veterinário · Gestor

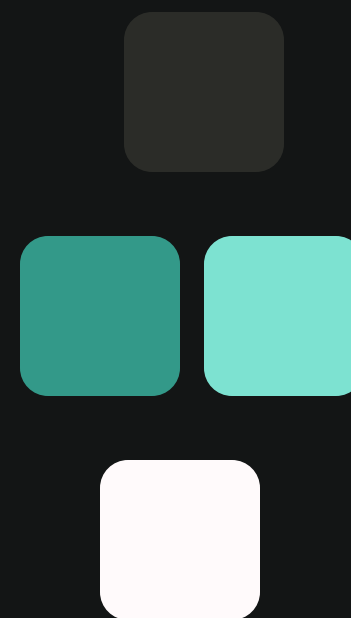

— Passos realizados

# Do sketch ao blueprint.

Pré-definições de fluxos · possíveis visualizações de dados · forma de acesso.

\* - Login -

- CRUD/Perfis;
- CRUD/Vacas;
- Mudar Visual;
- Fazendas;
- Colares;

Menu interativos

\* - Dashboard - Admin

Notificações

\* Tela Vaca Info

Colw Health

user

password

Entrar

Colw Health


Dash Board

Nome: Mimosa Foto

I.D.: 078

I.S.: 98

(info/mensagem)

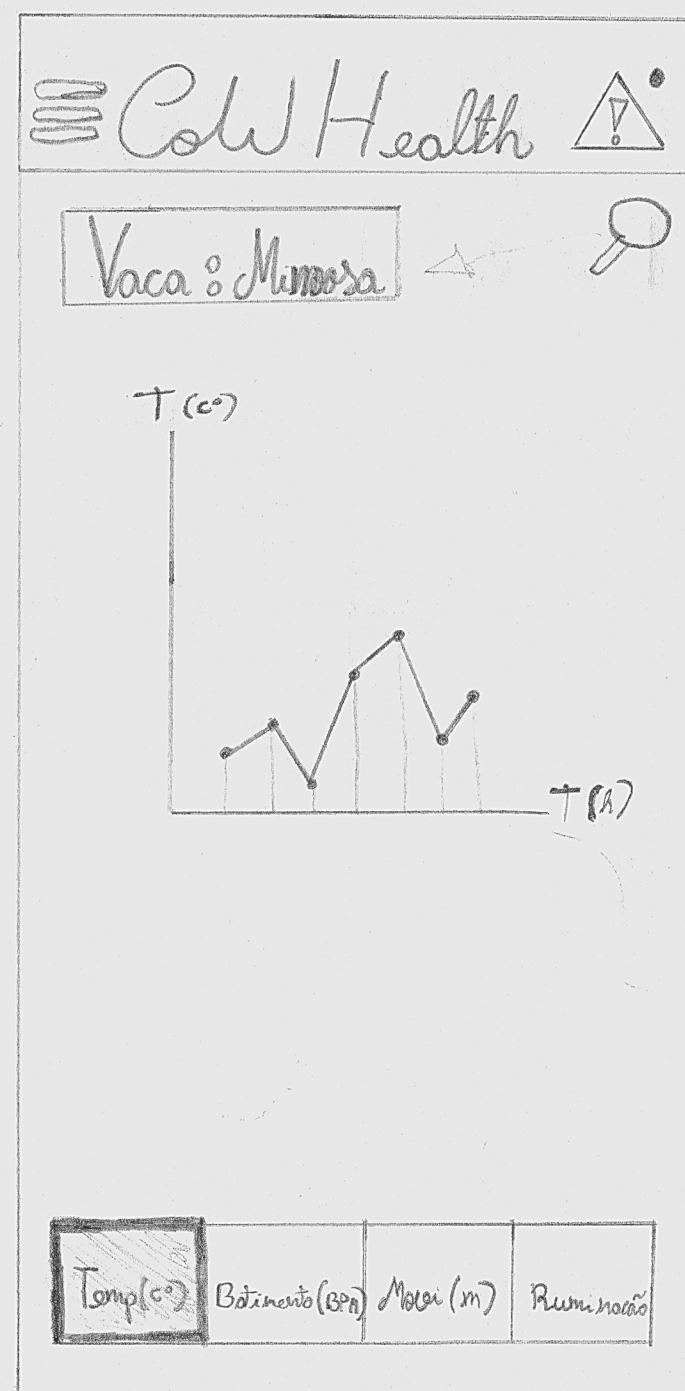

Colw Health

Visão Geral


| Vermelho | Vermelho | Amarelo | Verde |
|----------|----------|---------|-------|
| :        | :        | :       | :     |
| :        | :        | :       | :     |
| :        | :        | :       | :     |



COWHEALTH – MOBILE APP BLUEPRINT

UX / UI WIREFRAME SPECIFICATION

VERSION: 1.0  
DATE: 2024-05-21  
SHEET: 1 OF 1

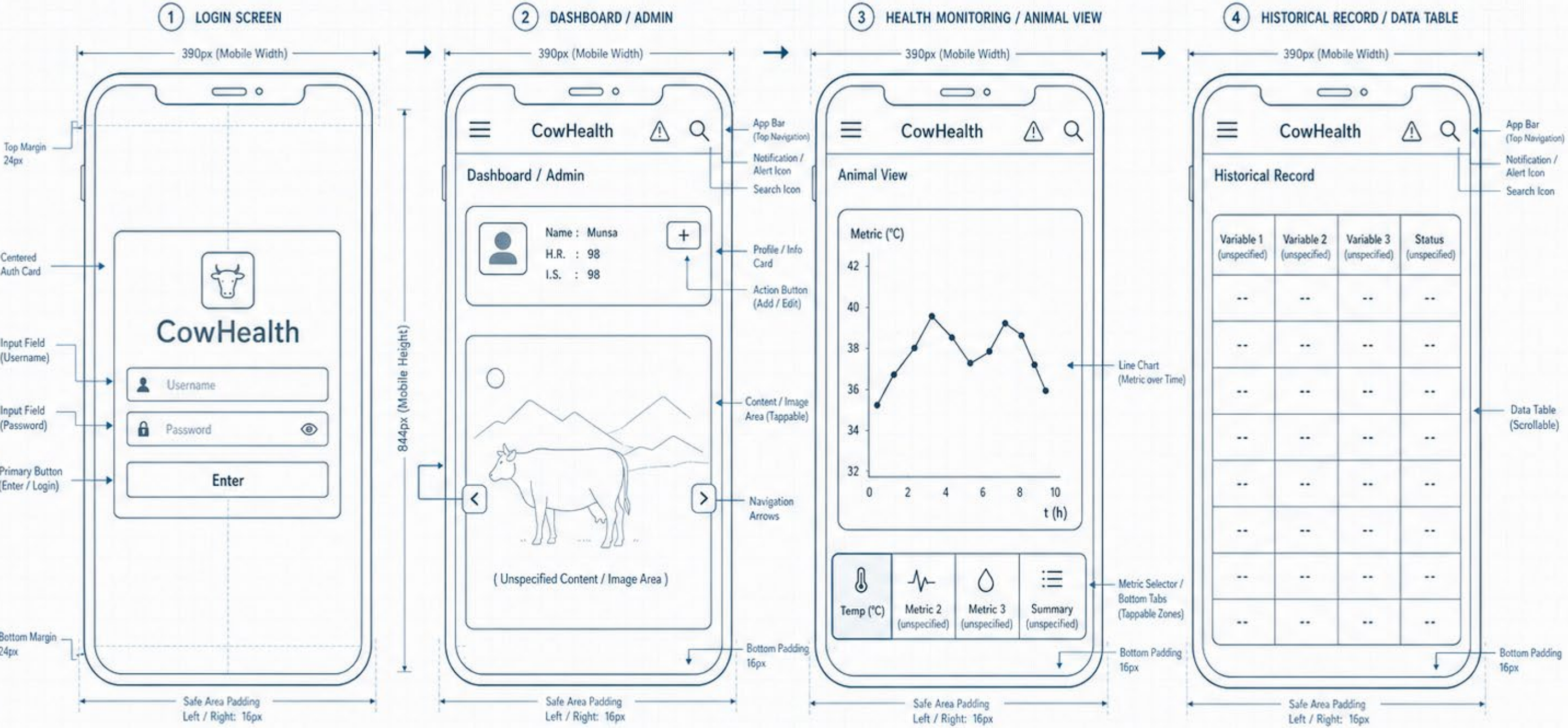

– Passos realizados

# Do blueprint ao design system.

Paletas – Organização de telas

**131515**

Onyx

**2B2C28**

Graphite



**339989**

Verdigris

**7DE2D1**

Pearl Aqua

**FFFAFB**

Snow

# Sistema enxuto , decisões claras.

Tokens derivados da paleta Onyx para uso outdoor: alto contraste, leitura rápida e densidade de dados sem ruído visual.

COR

Onyx base · Verdigris primária · Pearl Aqua accent.



TIPOGRAFIA

Space Grotesk display **Manrope**  
body **JetBrains Mono** dados

SISTEMA

Grid 4px · Radii 8/12/16/20 App  
bar 56 · Tap target 48 Safe area  
16



Mocinha

#022

39.4 °C

Brisa

#048

39.6 °C

# Acesso e primeiro contato.

Splash, onboarding e login. Apresentação da marca, do produto e do papel do usuário antes do dashboard.




TELA 01 · SPLASH

# Boot da marca em 800ms.

Logo monolítico sobre Onyx puro. Sincronização silenciosa em background; nenhum spinner para evitar a sensação de "esperando".

- **Marca primeiro:** tipografia da marca em escala display
- **Sem fricção:** auto-transiciona para login ou home se sessão válida

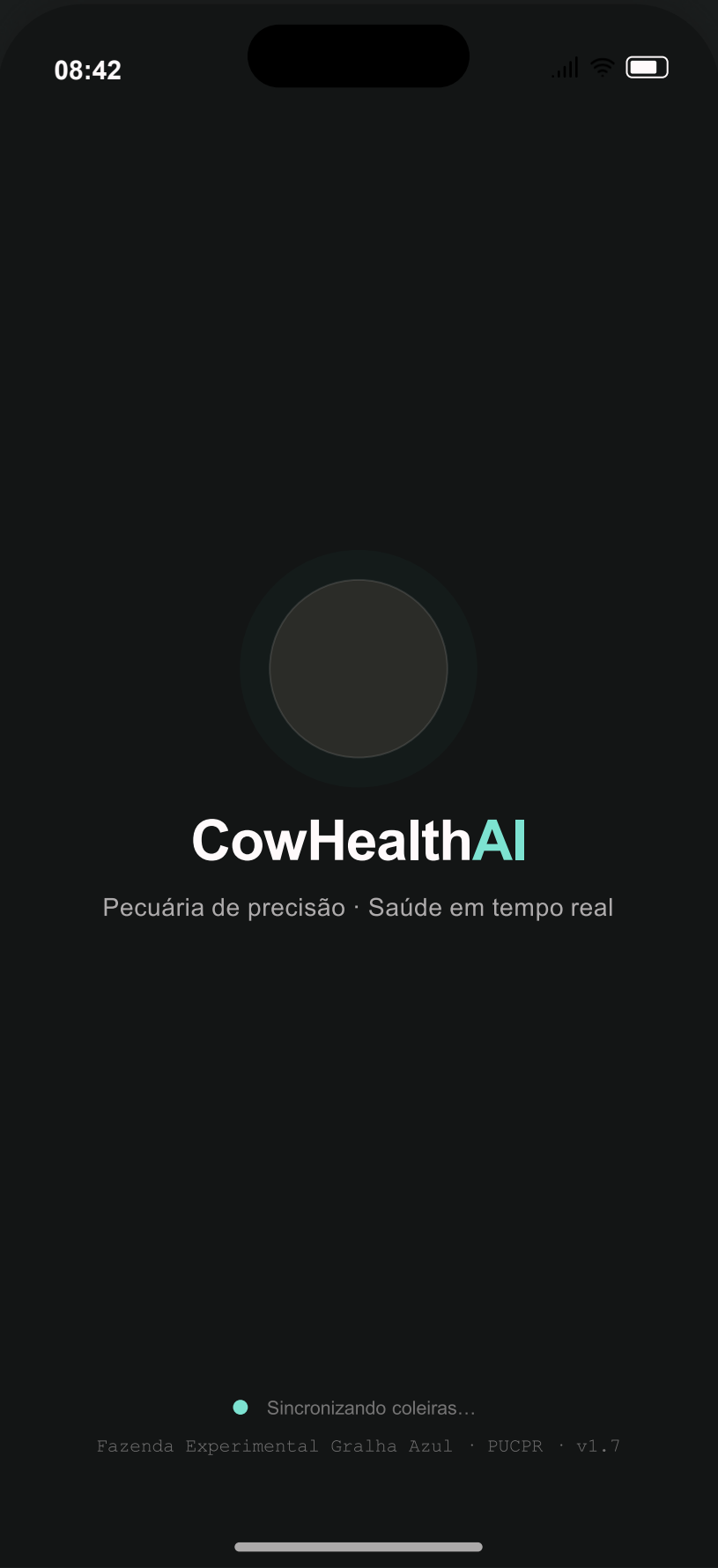

TELA 02 · ONBOARDING

# Três promessas, uma pergunta.

Carrossel curto que apresenta o valor (alerta precoce, telemetria contínua, modo offline). Termina pedindo o papel do usuário — produtor, veterinário ou gestor.

**Stepper visual** com 3 cards · ilustração placeholder pronta para arte final

**Pular sempre disponível** no canto superior direito

08:42



CowHealth AI

Pular

✓ Coleira ativa



39.1 °C

78 bpm

## O rebanho monitorado em tempo real .

Coleiras inteligentes lêem temperatura, frequência cardíaca e movimento de cada vaca — direto no seu bolso.



> Próximo


TELA 03 · LOGIN

# Entrar é uma linha reta.

Username + senha. Chips de papel selecionam o perfil ativo (RF12). Botões alternativos abaixo: cadastrar e recuperar senha.

**Inputs 48px** para uso com luva

**CTA primário** Verdigris · alto contraste

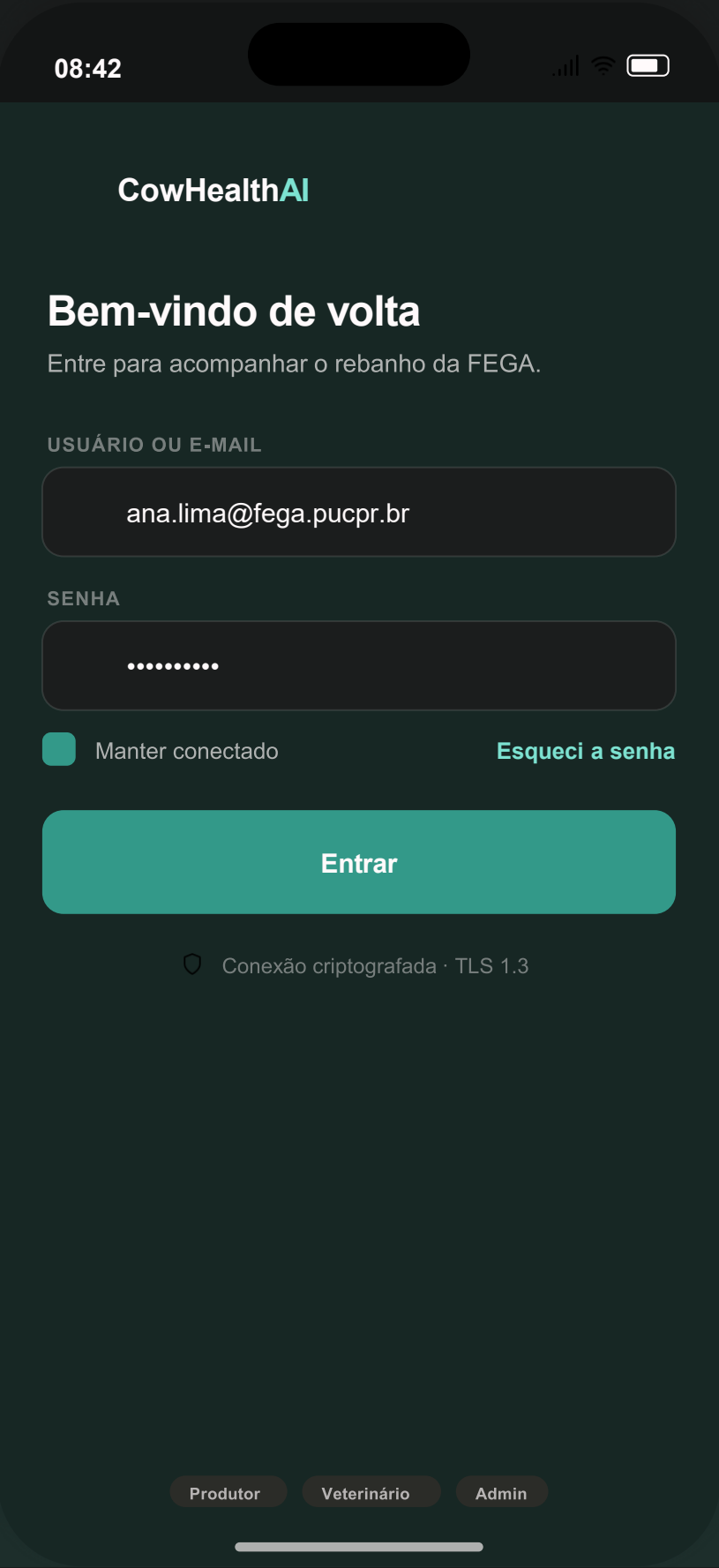

- Parte 02

# Núcleo do app.

Dashboard, rebanho, detalhe da vaca e histórico. O caminho de 3 cliques entre o sintoma e o dado.

# A fazenda numa olhada.

KPI hero (animais saudáveis), card de alerta crítico em destaque, atalhos para rebanho e mapa, e estado do rebanho próximo ao parto.

**Alerta crítico** sempre acima da dobra · Pearl Aqua sobre Verdigris

**Sincronização** com badge de offline e timestamp da última coleta






# Lista por risco.

Catálogo de animais ordenado pelo score de risco (RF27). Filtros por fazenda, lote e estado fisiológico (gestante, lactante, etc.).

**Score visual** em barra horizontal por animal

**Busca** por brinco eletrônico, nome ou ID do colar

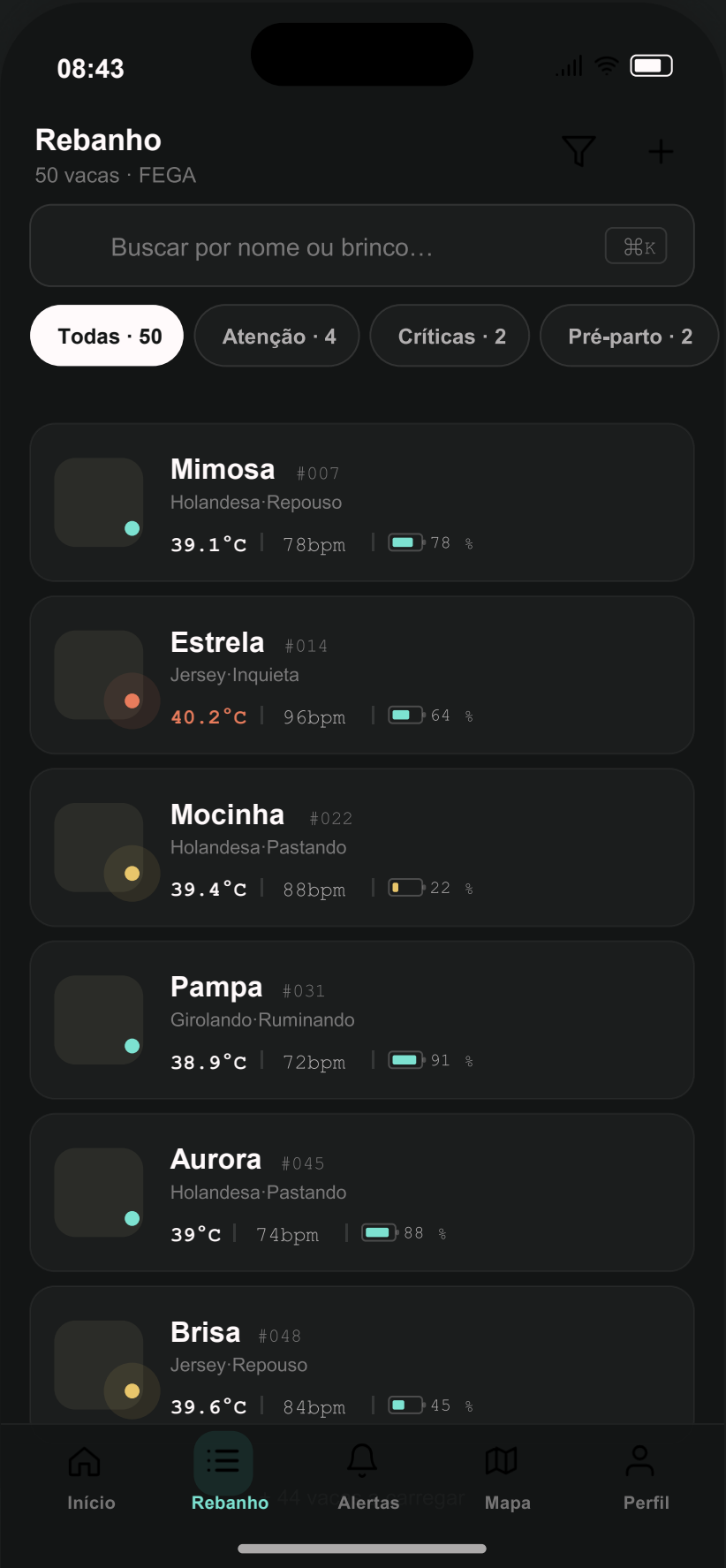

# Da vaca ao gráfico em 1 toque.

Hero com foto, ID e brinco. Tabs Visão Geral / Temperatura / Tabela.

Gráfico de linha com janelas 24h/7d/30d e marcadores de eventos

(parto, vacina).

**Modo de coleta** editável (RF10A — Higher · Default · Lower)

**Estado do colar:** bateria, sinal e modo no canto superior

08:44

< Estrela

#014 · BR-3401-014



⚠ Crítica

Jersey

FEGA · Estábulo A · Baia 14

🔋 64 % | 📶 Online | há 1 min

SCORE DE RISCO

84/100

Padrão consistente com febre+FC elevada nas últimas 4h.

40.2 °C

Temp:+1.1

96 bpm

FC:+18

4 min/h


Atividade:-8

Temperatura

1H

24H

7D

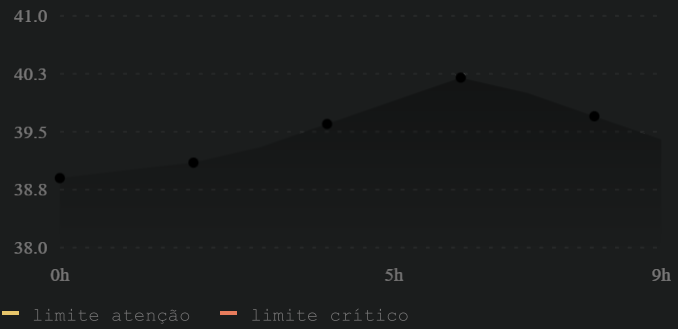

Temp



FC



Atividade



Resumo

Eventos recentes

● Pico de temperatura há 1 min 40.2 °C

● FC acima do basal há 38 min 96 bpm

● Última ordenha Robô #2


TELA 07 · HISTÓRICO

# Tabela **crua** , exportável.

Tabela rolável com timestamp, temperatura, atividade, ruminação e status. Indicadores semânticos (vermelho/âmbar/verde) por linha.

**Exportar CSV / JSON** (RF19) no header da tabela

**Sticky header** e linha mais recente em destaque Pearl Aqua

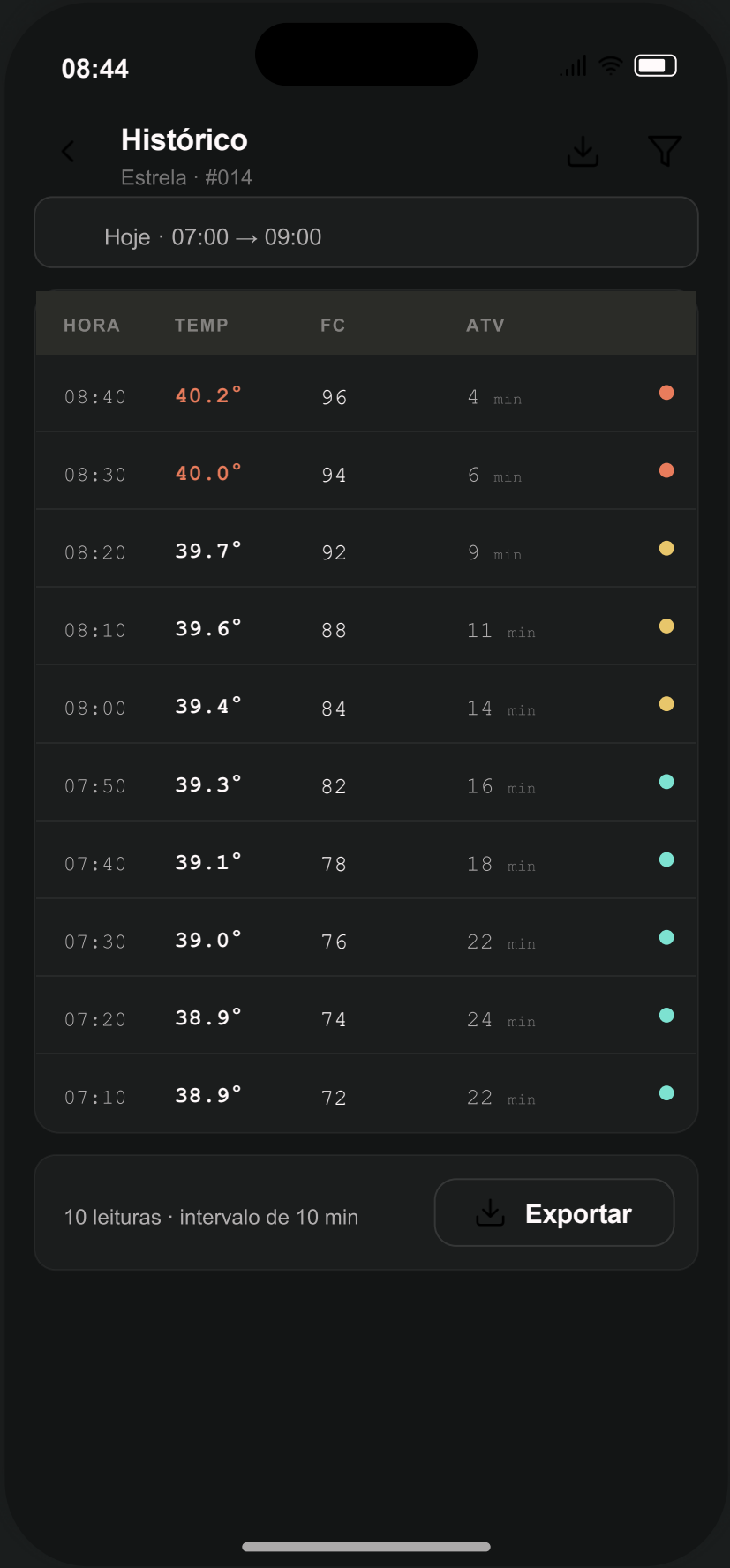

# Alertas e geografia.

A camada que reduz o tempo de resposta. Push, badge e localização do animal no piquete.


TELA 08 · ALERTAS

# Triagem por severidade.

Inbox cronológica agrupada por severidade. Cada card carrega ID do animal, métrica disparadora e ação primária (ver gráfico, marcar como visto).

**Crítico · Atenção · Info** — cores semânticas terrosas

**Swipe** para arquivar; long-press abre detalhe

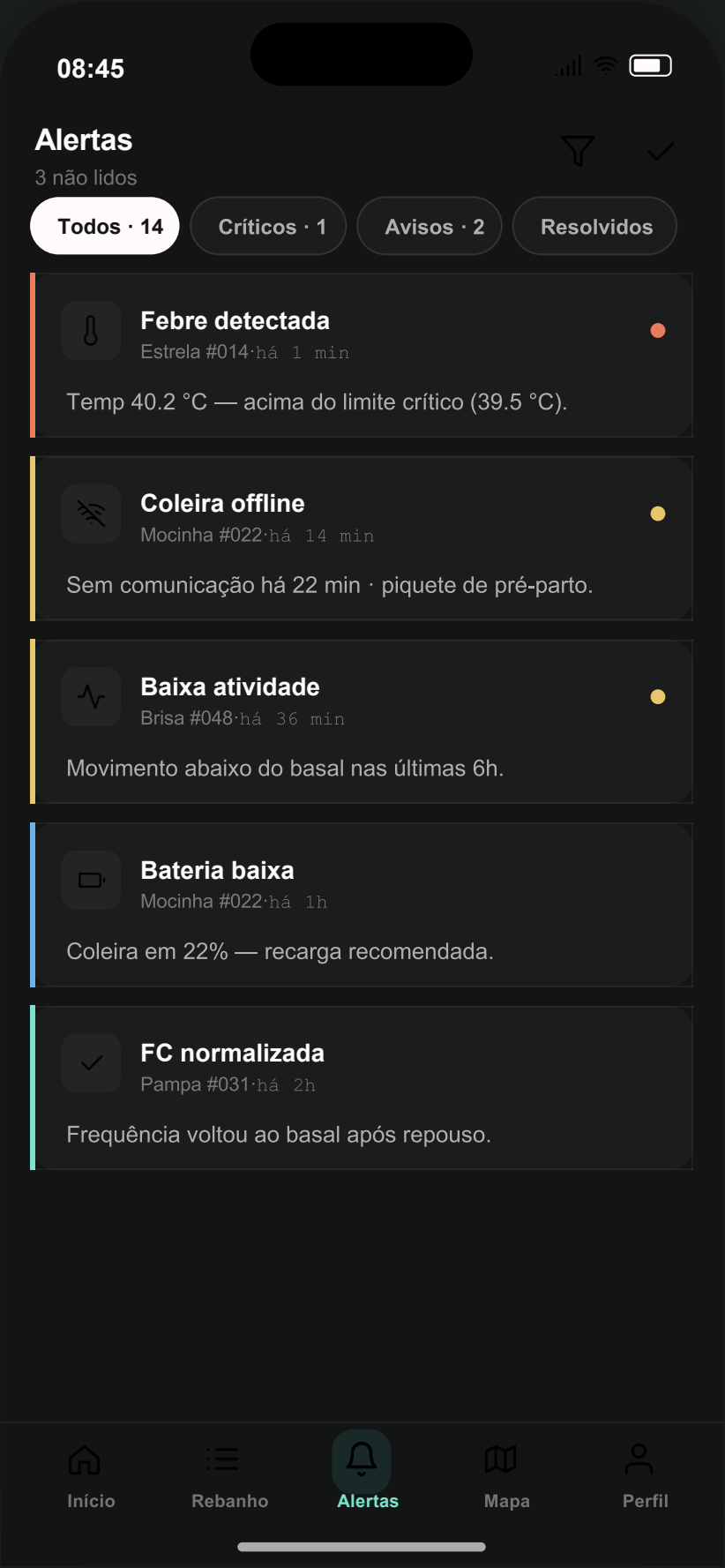




TELA 09 · MAPA DA FAZENDA

# Onde está cada colar.

Mapa da fazenda com pins por animal, agrupados por piquete. Heatmap opcional para densidade. Bottom sheet com lista do que está visível.

- **Pins coloridos** pelo score de risco
- **Geofence** por piquete, com alerta de saída

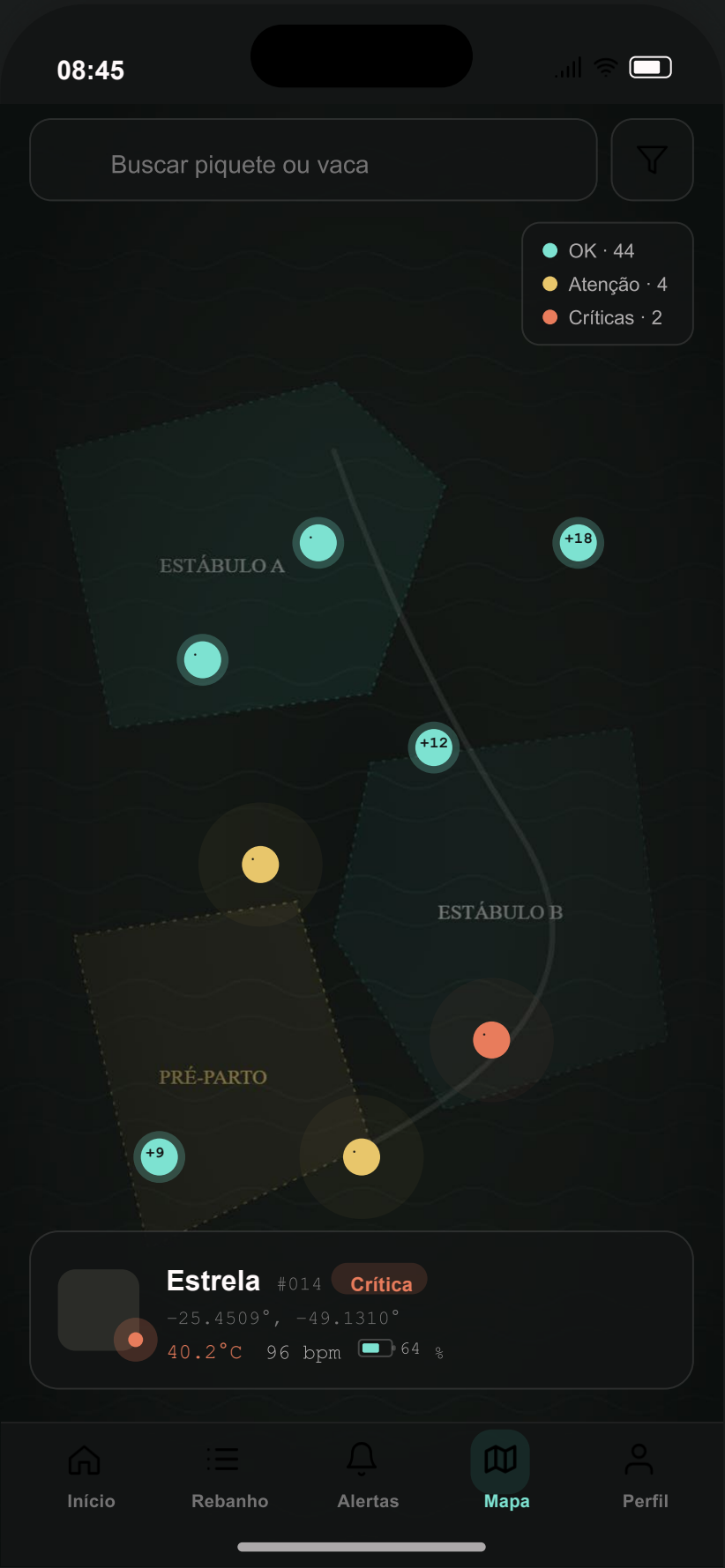

— Parte 04

# Conta e estados.


Perfil, configurações e os três estados que todo app esquece de desenhar: vazio, sincronizando e offline.



# Identidade profissional.


Cabeçalho com avatar, nome e papel (CRMV se veterinário).

Lista de fazendas vinculadas e atalho para alternar entre elas.

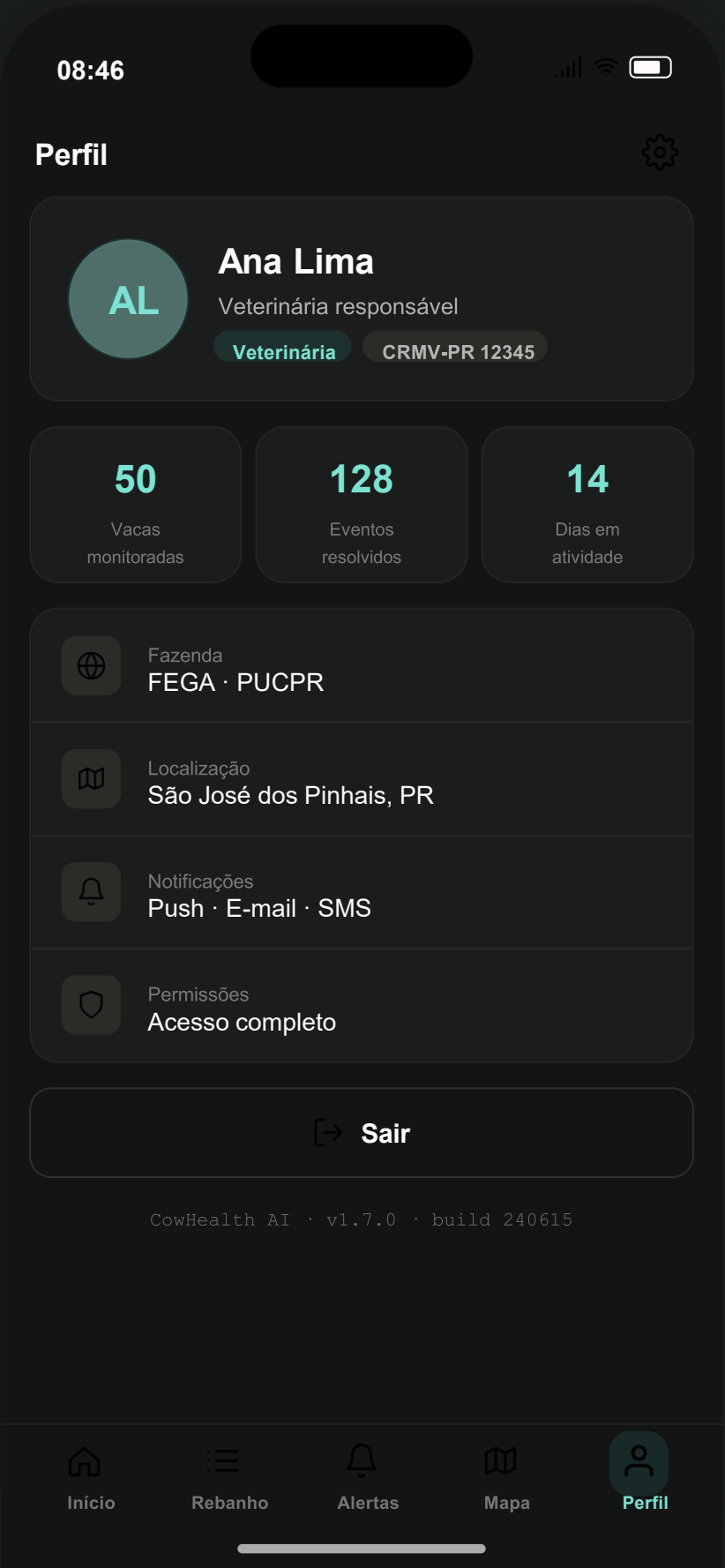

# Controles curados.


Notificações por severidade, modo de coleta padrão das coleiras, unidades, idioma e exportação. Sem labirintos de submenus.

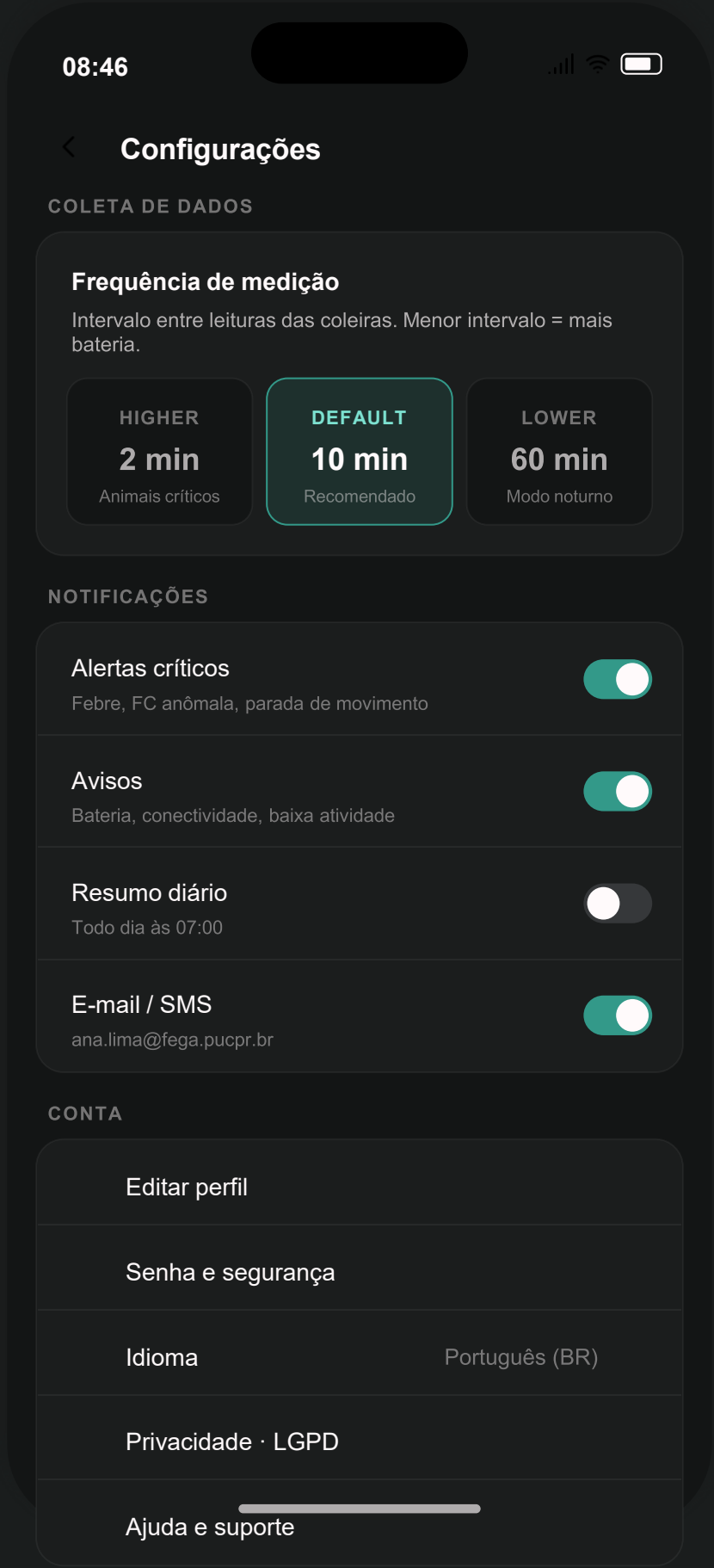

TELA 12A · ESTADO VAZIO

# Vazio com propósito.


Quando ainda não há animais cadastrados. Ilustração leve, copy direta e CTA claro: "Adicionar primeira vaca".

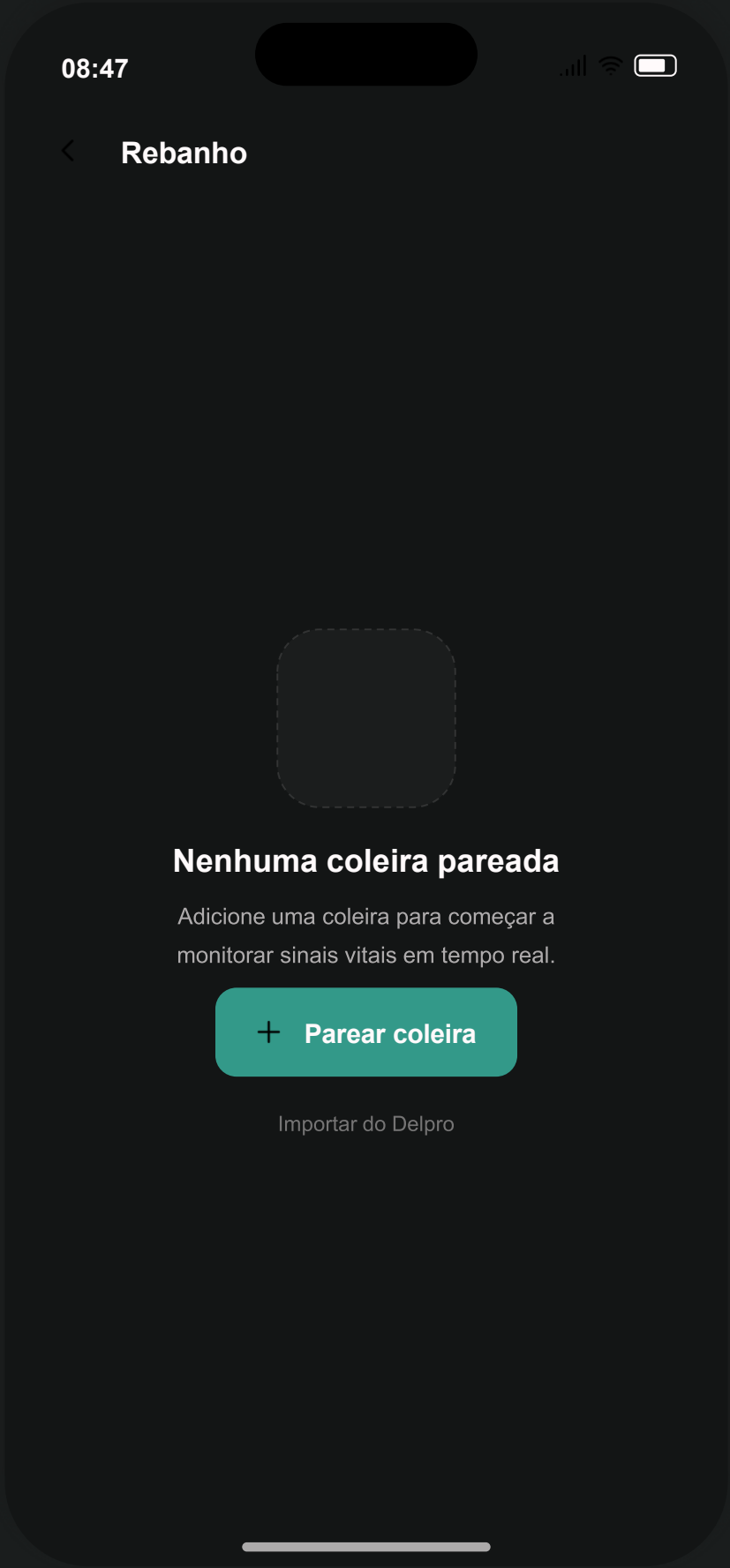

TELA 12B · LOADING

# Sincronia honesta.


Skeleton em vez de spinner. Mostra exatamente o que vai aparecer, com progresso quando há volume relevante (>3s).

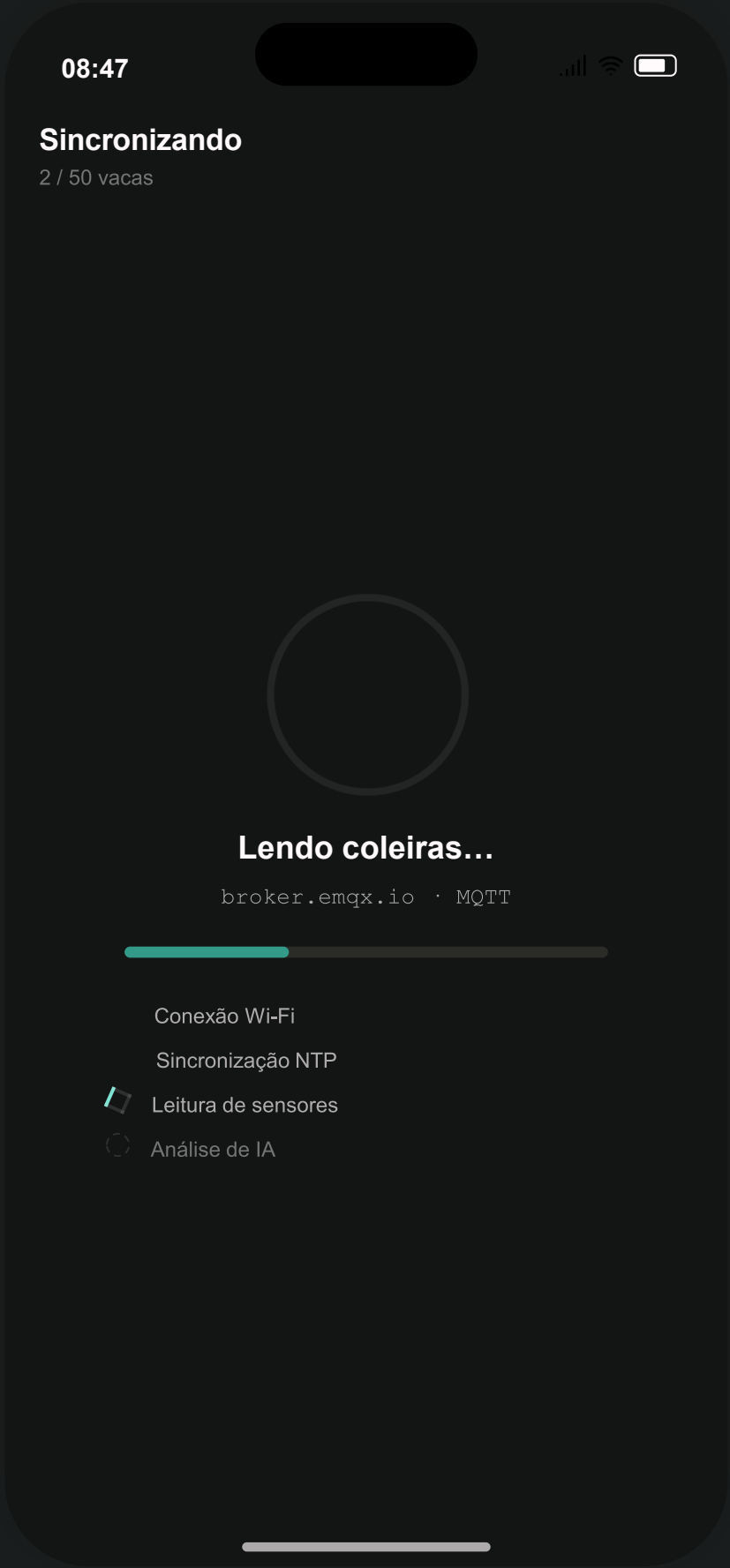

TELA 12C · SEM CONEXÃO

# Offline é um primeiro caso.

RNFU3 + pré-parto remoto. Banner persistente, dados em cache e ação clara para tentar de novo.

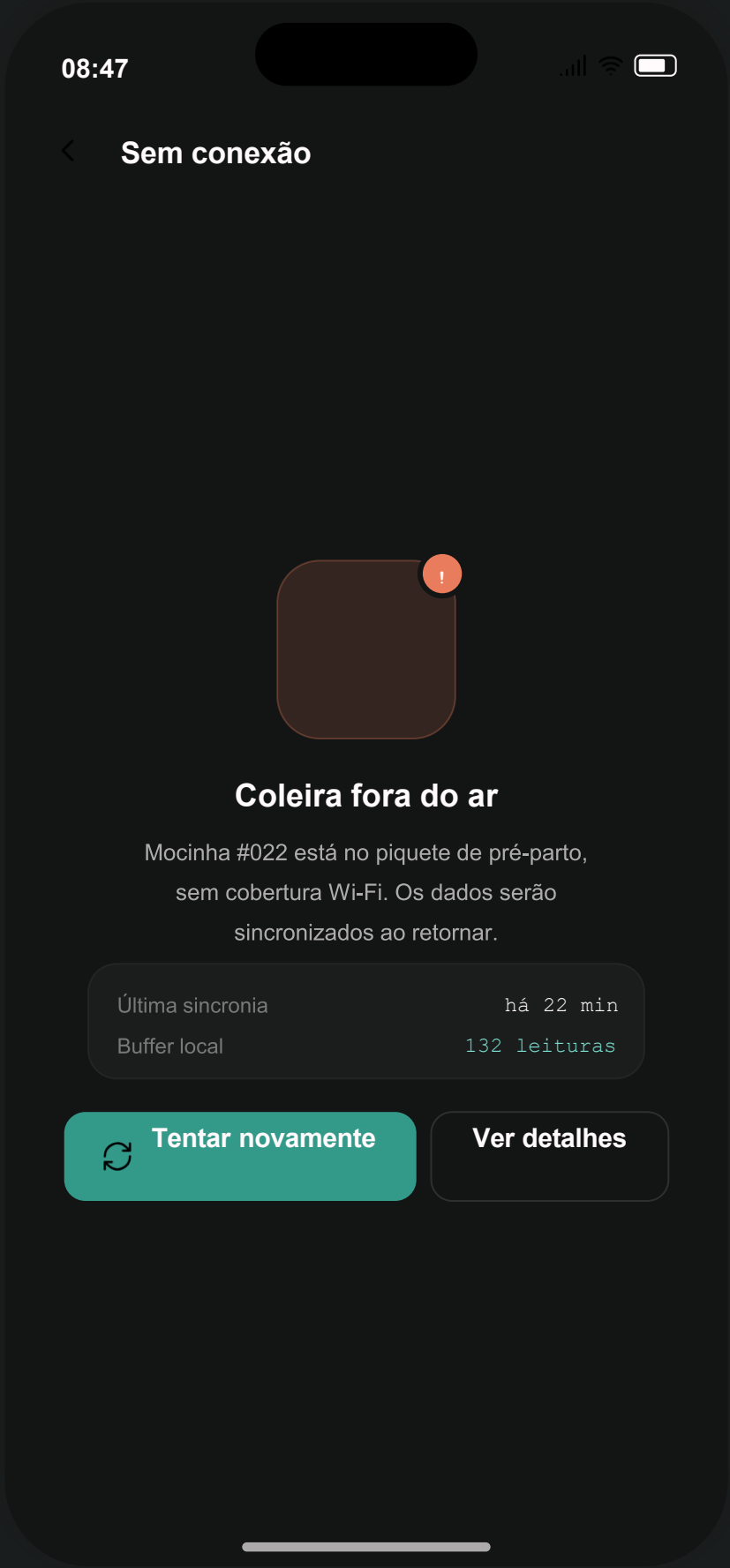



— Próximos passos

# Da tela ao protótipo.

Variações do Dashboard por papel · integração real do mapa · fluxo de pareamento de coleira · light mode · handoff em código.